

**DIE GRENZE
IST DEINE
FANTASIE.**

MiYO - MAKE IT YOUR OWN!


Mit der pastenförmigen MiYO Schichtkeramik lassen sich monolithische Restaurationen mit Ästhetik und Tiefenwirkung gestalten, die man nur von geschichteten Restaurationen kennt - bei wesentlich kürzeren Herstellungszeiten. Durch die minimale Schichtstärke von nur 0,1 - 0,2 mm gehört Chipping der Vergangenheit an.

Eine weitere Besonderheit von MiYO Restaurationen ist ihre einzigartige und unvergleichliche Lichtdynamik. Durch die Streuung des Lichts entsteht keine Schattenbildung wie bei Malfarben. Daher sehen MiYO Restaurationen auch im Mund natürlich aus und nicht nur auf dem Modell.

Vielseitige Anwendungsbereiche machen MiYO zu einem echten Allroundtalent für Zahn- und Gingivarestaurationen: Entweder MiYO pur, Color- und Strukturmassen, oder in smarter Hybrid-Technik, der Kombination von MiYO und Schichtkeramik.

Entdecken Sie MiYO für Ihr Labor!




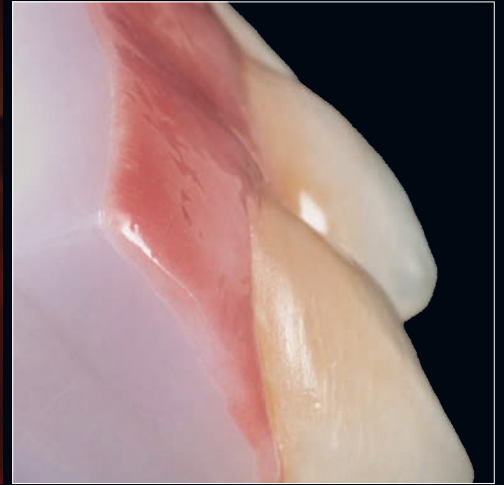

Nur 0,1 - 0,2 mm Schichtstärke, dadurch kein Chippingrisiko.




Natürliche Ästhetik und Tiefenwirkung mit einzigartiger Lichtdynamik ohne Schattenbildung.

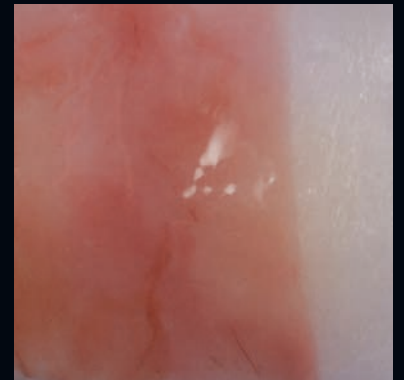

Detailgetreue Gestaltung natürlicher Effekte für Zähne und Gingiva. MiYO Colormassen können nass-in-nass aufgetragen werden, ohne zu verlaufen.



Keine Überraschungen: Farbe, Form und Effekte sind direkt beim Auftragen der Massen sichtbar und verändern sich nach dem Brand nicht.

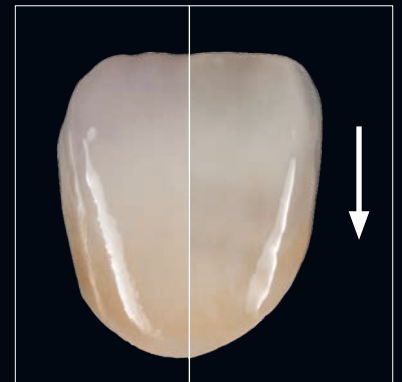

Mit den Value Enhancern Lumin oder Lumin plus den Helligkeitswert um 1-2 Stufen anheben, mit Smoke oder Slate senken, ohne die Charakteristik zu verlieren.



Smarte Hybrid-Technik MiYO Colormassen in Kombination mit Schichtkeramik.

Vorgefertigte, homogene Pasten für reproduzierbare Ergebnisse und einfaches Handling.



Mit MiYO Strukturmassen ohne Cut-back dynamische 3D-Effekte erzielen. Individuelle Oberflächenstruktur, Zahnform und okklusale Kontaktpunkte einfach mit dem Pinsel gestalten.



MiYO & MiYO pink I Kit Konfigurationen

Wählen Sie das MiYO „Standard“ Kit oder für mehr kreativen Spielraum das MiYO Kit Color+.
 Das MiYO pink Kit bietet alles was Sie für Gingiva Restaurationen benötigen.
 Alle Kits enthalten die passende Glasurpaste und ein Stain & Glaze Liquid.

MiYO Translucent Body Shades I fluor	● +	● +	● +	● +					
	Shade A	Shade B	Shade C	Shade D					
MiYO Translucent Value Enhancer I fluor	● +	● +			○ +	● +			
	Smoke	Lumin			Lumin+	Slate			
MiYO Translucent Effektmassen I fluor	● +	● +	● +	● +	● +	● +	z	z	
	Straw	Lotus	Clementine	Storm	Sage	Colbalt	Sunflower	Garnet	
MiYO Halo I fluor	● +	● +							
	Spring	Autumn							
MiYO Mamelon I fluor	● +	● +	● +						
	Wheat	Coral	Pumpkin						
MiYO Color I fluor	● +	● +	● +				z	z	
	Snow	Linen	Fissure (Pulver)				Moss	Night	
MiYO Structure I fluor	●	●	● +	● +	● +	● +	z	z	
	Ice	Blush	Ghost	Window	Enamel		HT Window	HT Enamel	

● MiYO Kit | + MiYO Color+ Kit | z Zusatzmasse

MiYO pink Translucent I no fluor		○	○	○				z	z
		Raspberry	Copper	Midnight				Carnation	Garnet
MiYO pink Color I no fluor	○	○	○	○	○	○	○	○	z
	Flamingo	Crimson	Plum	Merlot	Sorbet	Salmon	Sable	Thistle	Venule (Pulver)
MiYO pink Structure I no fluor		○	○	○					z
		Frost	Rouge	Orchid					Hibiscus

○ MiYO pink Kit | z Zusatzmasse

Unser SERVICE

SERVICE wird bei uns nicht nur groß geschrieben, sondern auch so gelebt. Denn wir möchten, dass unsere Kunden echte MiYO Fans werden. Je nach Bedarf bieten wir den passenden Support:

- Online Demos und Tutorials in denen live die praktische Anwendung von MiYO, MiYO pink und der Hybrid-Technik gezeigt wird.
- Produktpräsentation bei Ihnen vor Ort im Labor.
- Individuelle Online-Schulung mit Aufzeichnung nach Kauf eines MiYO Kits.
- Schulungsvideos, Infos zur Ofenprogrammierung und vieles mehr im Kundenportal auf www.miyoworld.eu
- Technischer Support für die schnelle Hilfe per Mail oder Telefon.

Und das Beste zum Schluß: Alles kostenlos!



Zubehör

Hochwertige Pinsel und Werkzeuge mit austauschbaren Spitzen.



Mehr Infos ...



www.miyoworld.eu



shop.jensendental.de



Jensen Dental GmbH
Gustav-Werner-Str. 1
72555 Metzingen, Germany
info@jensendental.de
+49 (0)7123 92260
www.jensendental.de